

Elevadores de transferência

Sunlift e Oxford





Sunlift / Oxford

A gama mais completa do mercado

Apresentamos a gama de guas para elevação e transferência de pacientes da Sunrise Medical. Modelos das gamas SUNLIFT e OXFORD com um desenho inovador, potencializando a segurança e comodidade tanto do utilizador como do seu acompanhante. Para uso doméstico, em lares ou hospitais. Todos com uma estética muito cuidada. A gama de guas da Sunrise Medical complementa-se com uma ampla possibilidade de fundas que se ajustam à capacidade funcional da pessoa e ao tipo de guá.

**Elevadores
Sunlift**



**Elevadores
Oxford**




Fundas



Com os modelos de elevadores da Sunrise Medical os seus utilizadores melhorarão, principalmente, a sua qualidade de vida



Tomada de medidas

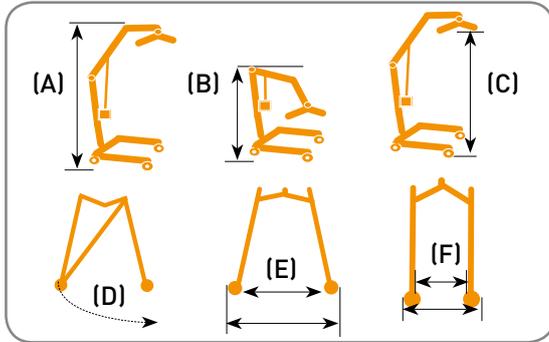

SUNLIFT Micro

SUNLIFT Mini

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Peso máximo do paciente | 130 kg | 130 kg |
| Longitude total máxima (com rodas para fora) | 1.110 mm | 1.130 mm |
| Longitude total mínima (com rodas para dentro) | 970 mm | 1.065 mm |
| Largura máx. com pés fechados | 545 mm | 540 mm |
| Altura total máxima (sem carga) (A) | 1.725 mm | 1.870 mm |
| Altura total mínima (sem carga) (B) | 1.130 mm | 1.280 mm |
| Altura máxima do cabide (sem carga) (C) | 1.483 mm | 1.628 mm |
| Altura mínima do cabide (sem carga) | 460 mm | 513 mm |
| Raio de giro com os pés abertos (D) | 1.130 mm | 1.240 mm |
| Pés abertos: (E) Largura máxima (externa) Largura máxima (interna) | 870 mm 740 mm | 940 mm 810 mm |
| Pés fechados: (F) Largura máxima (externa) Largura máxima (interna) | 545 mm 465 mm | 540 mm 470 mm |
| Altura superior dos pés | 100 mm | 100 mm |
| Distância mínima de altura | 20 mm | 20 mm |
| Rodas dianteiras | 75 mm | 75 mm |
| Rodas traseiras | 100 mm | 100 mm |
| Peso do conjunto cabide, braço e componentes electrónicos | 16,6 kg | 17,54 kg |
| Peso conjunto da base | 13,34 kg | 13,6 kg |
| Peso das baterias | 2,76 kg | 2,76 kg |

Gama SUNLIFT



Especificações técnicas

(Comum aos 4 modelos)

Baterias: 2 x 12v de gel ácido

Capacidade baterias: 2,9 Amph

Corrente entrada carregador: 230 v / 50 Hz 0.12 A

Corrente saída carregador: 28 v 0.5 Amph

SUNLIFT Midi

150 kg

1.225 mm

1.160 mm

640 mm

1.940 mm

1.285 mm

1.688 mm

555 mm

1.380 mm

1.075 mm

980 mm

640 mm

540 mm

100 mm

20 mm

75 mm

100 mm

17,6 kg

15,1 kg

2,76 kg

SUNLIFT Major

175 kg

1.340 mm

1.275 mm

650 mm

2.006 mm

1.435 mm

1.813 mm

575 mm

1.500 mm

1.185 mm

1.105 mm

650 mm

520 mm

110 mm

15 mm

75 mm

100 mm

22,75 kg

18,1 kg

2,76 kg

Características comuns



Os pés abrem e fecham pressionando o pedal ergonómico com o pé. Assim consegue-se uma maior ou menor largura do elevador.



Comando com grau de proteção IPX4 contra a humidade e salpicos e com um desenho ergonómico



Ampla asa ergonómica que permite posicionar os cotovelos a 90° para um manuseio mais cómodo da grua sem forçar o pulso.

Gruas OXFORD



| | OXFORD Journey | OXFORD Ascend |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Tipo de grua | Alumínio, dobrável, bipedestação | Alumínio, bipedestação |
| Peso máximo do paciente | 155 kg | 170 kg |
| Longitude total máxima | 1.000 mm | 1.100 mm |
| Longitude total mínima | 935 mm | 1.000 mm |
| Altura total máxima | 1.600 mm | 1.710 mm |
| Altura total mínima | 1.130 mm | 1.070 mm |
| Altura fechada | 525 mm | n/a |
| Longitude fechada | 1.040 mm | n/a |
| Largura fechada | - | n/a |
| Altura máxima do cabide | 1.530 mm | 1.665 mm |
| Altura mínima do cabide | 720 mm | 990 mm |
| Raio de giro | 1.145 mm | 1.320 mm |
| Largura externa com os pés abertos | 970 mm | 995 mm |
| Largura interna com os pés abertos | 875 mm | 885 mm |
| Largura externa com os pés fechados | 685 mm | 630 mm |
| Largura interna com os pés fechados | 590 mm | 510 mm |
| Altura total dos pés | 110 mm | 120 mm |
| Espaço sobre o solo | 30 mm | 35 mm |
| Rodas dianteiras | 75 mm | 100 mm |
| Rodas traseiras | 100 mm (com travões) | 100 mm (com travões) |
| Peso conjunto cabide e braço | 19,2 kg | 20,5 kg |
| Peso conjunto da base | 18,2 kg | 19,5 kg |
| Peso das baterias | 2,8 kg | 3 kg |
| Peso total (com baterias) | 40,2 kg | 47 kgs |



OXFORD Advance

OXFORD Presence

Alumínio, dobrável

De alumínio

155 kg

227 kg

1.300 mm

1.460 mm

1.250 mm

1.400 mm

1.860 mm

2.065 mm

1.360 mm

1.460 mm

450 mm

n/a

1.180 mm

n/a

550 mm

n/a

1.690 mm

1.910 mm (1.550 com cabide de 4 pontos)

390 mm

430 mm (390 mm com cabide de 4 pontos)

1.420 mm

1.630 mm

1.080 mm

1.150 mm

1.000 mm

1.020 mm

670 mm

670 mm

570 mm

550 mm

115 mm

120 mm

30 mm

35 mm

75 mm

100 mm

100 mm (com travões)

100 mm (com travões)

14 kg

17 kg

14,9 kg

20 kg

3 kg

3 kg

31,7 kgs

40 kg

Acessórios Grua Presence



Barra de suporte das cestas com 4 pontos de fixação

Com a Presence podem-se utilizar dois tipos de barra de suporte: a barra standard ou a de 4 pontos de fixação. Esta opção permite ao cuidador escolher o sistema que melhor se adapte ao seu caso, em função do nível de ajuda e suporte que o paciente necessite. Com a barra de 4 pontos de fixação, só é possível utilizar as cestas Comfort.



Balança

Barra standard de 6 ganchos com balança, ou barra de 4 pontos de fixação com balança.

Fundas

Gama standard



| | Ajuste rápido | Ajuste rápido de luxo | De acesso |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Utilização | 85 % dos casos | 95% dos casos | Facilita o acesso à sanita |
| Material | Poliéster, acolchoada ou rede | Acolchoada | Poliéster |
| Tamanho | Média ou grande | Média | Média |
| Nível de independência * | 1 e 2 | 1 e 2 | 2 e 3 |
| Outros | - | Com ou sem suporte para cabeça | |



| Do assento largo | |
|--------------------------------|------------------------|
| Utilização | Utilizadores amputados |
| Material | Poliéster |
| Tamanho | Média |
| Nível de independência* | 1 e 2 |
| Outros | - |

Seleção do arnés adequado para cada caso

| | Inodoro | Cadeira inodoro para banheira | Cadeira para cadeira | Da cama para a cadeira | Do chão para a cama | Cadeira a cadeira inodoro |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Funda de ajuste rápido | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Funda de ajuste rápido de luxo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Funda de acesso | ■ | | ■ | | | ■ |
| Funda do assento largo | ■ | | | ■ | ■ | |

* Nível de independência.

1 = Dependência total

7 = Independência total



Profissionais



| | Ajuste rápido acolchoada | Ajuste rápido de luxo | Encosto Alto |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Uso indicado | 85% dos casos | 95% dos casos (apto para amputados) | Suporte ao nível dos ombros e cabeça |
| Material | Poliéster ou em rede | Poliéster | Poliéster |
| Tamanho | XS - XL | XS - XL | XS - XL |
| Nível de independência* | 1 e 2 | 1 e 2 | 1 e 2 |
| Outros | - | Com ou sem suporte para cabeça | - |



| | Comfort | Vertical | Transporte |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Uso indicado | Para grua com gancho de 4 pontos | Para grua de bipedestação | Para grua de bipedestação |
| Material | Poliéster, em rede e descartável | Poliéster | Poliéster |
| Tamanho | XS - XL | Tamanho único | Tamanho único |
| Nível de independência* | 1 e 2 | 3 e 4 | 2, 3 e 4 |
| Outros | Com suporte de cabeça almofadado | - | - |

Seleção do arnés adequado para cada caso

| | Inodoro | Cadeira inodoro para banheira | Cadeira para cadeira | Da cama para a cadeira | Do chão para a cama | Cadeira a cadeira inodoro |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Funda de ajuste rápido | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Funda de ajuste rápido de luxo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Funda com encosto alto | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| Funda Comfort | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Funda Vertical | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| Funda de Transporte | ■ | | ■ | ■ | | ■ |



Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio

Tolerância de Fábrica +/- 2 cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Rev.7 Agosto 2021